

# NOTO


LA DIFERENCIA DE SER ÚNICO

2022

RESULTADOS

CALIDAD | SEGURIDAD | INNOVACIÓN

► **Moderno.** Equipo de CO<sub>2</sub> y Vacum versátil.

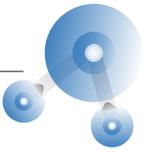

# DIOXI 1000®

TECNOLOGÍA EN CARBOXITERAPIA  
Control y seguridad micro-procesados

¡Lo último para tratamientos mínimamente invasivos y placenteros!

El desarrollo de DIOXI 1000 permite obtener los mejores resultados para tratamientos con Dioxido de Carbono gracias a su velocidad, caudal, modos de administración y niveles de seguridad.

¡Tolerancia y calidad!

La utilización del CO<sub>2</sub> posee un amplio campo de trabajo tanto en facial, corporal y capilar. Algunos pacientes experimentan molestias con la administración del gas frío. NOTO® desarrolló DIOXI 1000®, con la particularidad de elevar la **temperatura de salida a 36° C**, beneficiando al paciente con sesiones placenteras, mínimamente invasivas e indoloras.



Safety Control® - Sistema de Seguridad  
DIOXI 1000 posee un sistema de seguridad sonora cuando la presión es mayor o menor a la permitida y cuando la salida se encuentra obstruida, ambas condiciones son visualizadas en el display del equipo, ofreciendo la máxima seguridad en tratamientos mínimamente invasivos.



Temperatura  
Controlada  
36° C.



## DIOXI 1000

- Administración por **dosis o volumen**
- Adaptable con agujas g30, g27 y g25
- **20 - 250 cm<sup>3</sup>** rango máximo de caudal
- Control de temperatura en **36° C**
- Sistema de seguridad **SC® (Safety Control)**
- Filtro descartable y reemplazable
- **Alarma de seguridad**
- Tecnología SMD
- **1 - 2500 cm<sup>3</sup>** volumen máximo de administración

► **Destacado.** Poder de vacío.

# VAC STATION®


VacStation® es una estación de vacum pensada para aquellos que desean y precisan complementar sus procedimientos mediante la aplicación de vacío localizado logrando diferentes prácticas, entre ellas decolage, pequeñas liposucciones y utilidades anexas. Posee tres modos de operación **pulsante, continuo y temporizado o decolage**.



## VAC STATION

- Potencia bomba de vacío **-800 mbar máximo**
- Adaptable a jeringas
- **8 L/M (litros por minuto)** máximo de caudal de aspiración
- Accionamiento de vacío por **pedal**
- Modo de operación **continuo, pulsado o decolage**
- **Trampa de seguridad** de almacenamiento líquido hasta **350 cm<sup>3</sup>**
- Soporte estable y antivibratorio
- Intuitivo
- Filtro de seguridad de agentes no líquidos

# CARBOVAC®

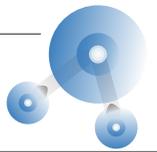

¡La combinación por excelencia en la búsqueda de resultados únicos!

El desarrollo del equipo CARBOVAC® permite combinar la administración de CO<sub>2</sub> con vacío de forma simultánea para tratar patologías como P.E.F.E., decolaciones de septos fibrosos, lipotransferencias, injertos autólogos, entre otros.

Algunos beneficios de la implementación simultánea de vacío con anhídrido carbónico son: incrementar la aceptación del lecho receptor del injerto de grasa autóloga en la zona deseada, inhibir la difusión del CO<sub>2</sub> en áreas indeseadas, aumentar el desplazamiento de fibrosis para facilitar el tratamiento de adiposidad localizada.

- Administración de CO<sub>2</sub> por **dosís o volumen**
- Adaptable con agujas g30, g27 y g25
- **20 - 250 cm<sup>3</sup>** rango máximo de caudal
- Control de temperatura en **36° C**
- Sistema de seguridad **SC® (Safety Control)**
- Monitor de vacío mediante control remoto
- **Alarma de seguridad**
- Administración de CO<sub>2</sub> **continua o pulsante**
- **1 - 2500 cm<sup>3</sup>** volumen máximo de administración



## Principales indicaciones CARBOVAC

- Quirúrgicas**
- Injerto de grasa autóloga
  - Lipotransferencia
  - Decolaciones de septos fibrosos
  - Entre Otros

- No Quirúrgicas**
- Adiposidad localizada
  - P.E.F.E.
  - Capilar, Facial y Corporal
  - Entre Otros

## ► **Lanzamiento.** VERSATILIDAD CON PLASMA

# PLASMA RAY®

¡La tecnología en su máxima expresión!

PLASMA RAY es el resultado de la utilización de tecnología SMD, diseño y calidad en manufactura.

La aplicación más destacada y conocida con plasma es blefaroplastia no quirúrgica pero, con PLASMA RAY, se pueden realizar más aplicaciones, gracias a la utilización de agujas descartables, niveles de seguridad y tecnología que garantiza el control de flujo deseado.

Para mayor confortabilidad de uso y acorde al tipo de patología a tratar PLASMA RAY permite controlar la emisión de una forma continua, pulsada o automática.



Indicador de emisión de Plasma

- **92 KHz** frecuencia de emisión
- Agujas **esterilizables y/o descartables**
- Modo de trabajo **automático, manual pulsado y continuo**
- Sistema de seguridad **ID® (Impedance Detector)**
- **Fulguración**
- **Cauterización**
- **Blefaroplastia no quirúrgica**
- Alimentación 110/220 Volts
- Sistema de medición de impedancia (ID®)


► **SISTEMAS ÚNICOS EN ARGENTINA.** LO MÁS AVANZADO EN RADIOFRECUENCIA RESISTIVA.

# TRIMAX® Y BIMAX®

RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR Y BIPOLAR RESISTIVA REAL.

## Radiofrecuencia Resistiva Real.

El sistema Trimax de 90 watts [Tripolar Real] cuenta con 3 emisores y un receptor de 3 campos cruzados, duplicando los emisores para tratamientos corporales. Todo esto con el fin de entregar de forma continua o pulsante la máxima temperatura adecuada a cada tratamiento.

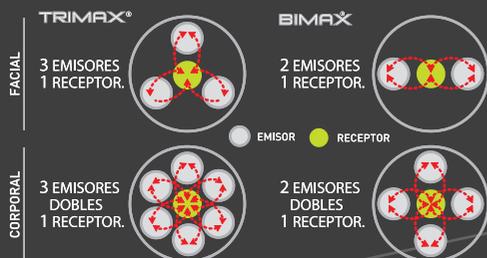

## ¿Cómo funcionan nuestros sistemas?

Gracias a la cantidad, ubicación de sus emisores y el sistema de campos cruzados contruidos en acero inoxidable quirúrgico el equipo TRIMAX logra una mayor focalización y concentración de energía en la zona de aplicación.

La temperatura en niveles superficiales de la piel llegan entre los 36 °C y los 42 °C, y entre los 55 °C y los 58 °C en los niveles mas profundos (dermis). Esta focalización de energía permite una contracción inmediate de las fibras de colágeno y elastina aumentando su desnaturalización y permitiendo el logro de resultados concretos, inmediatos y visibles.

**TRIMAX®**

- Facial y Corporal.
- Tripolar Real (Multipolar).
- Genera 3 campos cruzados y desfasados.
- Pantalla Táctil.
- **Sensor y Controlador de Temperatura.**
- Corte de Seguridad a 45°C.
- Modo Continuo y Pulsante Variable.
- Modo Asistido Controlado.
- 260 Watt de Potencia.
- 90 Watt de Emisión de RF.
- Indicador de Contacto (TC®)
- Cabezales de Acero Quirúrgico y Resina Acetal Hipoalérgica.
- Sistema de Emisión por Contacto.



**¡ÚNICO EQUIPO CON SENSOR, ALARMA Y CONTROLADOR DE TEMPERATURA!.**



**BIMAX®**

- Facial y Corporal.
- Tripolar.
- Pantalla Táctil.
- Modo Continuo y Pulsante Variable.
- 190 Watt de Potencia.
- 60 Watt de Emisión de RF.
- Indicador de Contacto (TC®)
- Cabezales de Acero Quirúrgico y Resina Acetal Hipoalérgica.
- Sistema de Emisión por Contacto.



► **ULTRACAVITACIÓN DE FRECUENCIA VARIABLE**

**CAV47®**

**MÁXIMA EFICACIA EN MODELACIÓN CORPORAL.**  
SISTEMA DE DOBLE PASTILLA Y 47 WATT.

**¡Liposucción sin cirugía!**

También llamada liposucción sin cirugía, la ultracavitación es una novedosa técnica de modelación corporal basada en la generación de micro burbujas que por cambios de presiones parciales implosionan desintegrando los adipocitos, para luego ser eliminados naturalmente.

Debido a que el Cav 47 utiliza un sistema de doble pastilla su potencia máxima de contacto directo en el cabezal es de 47 Watt lo que genera mayor estabilidad y precisión.

A una Frecuencia Variable le brinda, de una manera fácil y amigable todas las posibilidades de trabajo en los distintos tipos de adiposidad tales como fibrosas, compactas, edematosas y laxas.

El CAV 47 es la mejor opción para combatir la celulitis y las adiposidades localizadas asegurando tratamientos cortos, indoloros, con resultados duraderos y visibles desde las primeras sesiones.

**CAV 47**

- Frecuencia Variable de **35-38-40 Khz.**
- Modo Continuo y Pulsante Variable
- **47 Watt de Onda de Choque.**
- 180 Watt de Potencia
- Indicador de Contacto (TC®)
- Cabezales de Acero Quirúrgico y Resina Acetal Hipoalergénica.



► **Dual** LA MEJOR COMBINACIÓN

**TRICAV®**

**UN NUEVO ESTANDAR EN MODELACIÓN.**  
ULTRACAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR/MULTIPOLAR.

**NOTO innovación constante.**

Noto reunió las principales características del Trimax y del Cav 47 para crear un equipo realmente novedoso en cuanto a prestaciones y resultados en tratamientos, el Tricav.

**TRICAV depura la técnica de modelación.**

Luego de la destrucción del adipocito producida por la ultracavitación, la Radiofrecuencia aumenta la circulación en la zona tratada lo que favorece la calidad de la piel.

A su vez por efecto térmico aumenta el metabolismo de los adipocitos incrementado de manera eficaz la modelación de la zona tratada.

La combinación de estas dos técnicas permite eliminar la adiposidad localizada y producir una piel renovada y de aspecto rejuvenecido desde la primera sesión. Reduce volumen, mejora la celulitis, las arrugas y favorece la estimulación del colágeno y la elastina.

TRICAV depura la técnica de modelación y por tanto mejora los resultados añadiendo en cada sesión efectos remodeladores-tensores gracias a la aplicación de la última tecnología en Radiofrecuencia tripolar + Ultracavitación.

TRICAV fija un nuevo estándar en el cuidado de la piel y del cuerpo, llegando a nuevos niveles de eficacia y confiabilidad.



**TRICAV**

- RF Facial y Corporal.
- Tripolar Real (Multipolar).
- Pantalla Táctil.
- Modo Continuo y Pulsante Variable.
- 260 Watt de Potencia.
- 60 Watt de Emisión de RF.
- Cabezales de Acero Quirúrgico y Resina Acetal Hipoalergénica.
- Sistema de Emisión por Contacto.
- Potencia de Ultracavitación **47 Watt de Onda de Choque.**
- Frecuencia de Ultracavitación 40 khz.

# Lumière

**TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS LUMÍNICOS**  
4 longitudes de onda

## ¡Acción sistémica no invasiva!

Fotobiomodulación o Emisores de Luz Láser de Baja Intensidad es una técnica lumínica que posee versatilidad en el tratamiento de afecciones de acuerdo al color de diodo emisor de luz seleccionado permitiendo al profesional, a través de cualidad no nociva, lograr los resultados esperados.

Lumière posee su diferencial en el espectro electromagnético donde se encuentra, el espectro visible, imposibilitando efectos celulares no deseados en la zona facial, corporal o capilar expuesta.

La potencia de 216 Joules del Lumière permite alcanzar los resultados esperados gracias al control preciso y microprocesado para aplicar en todos los fototipos cutáneos, inclusive el VI (de acuerdo a la escala de Fitzpatrick).




LUMIÈRE

- **216 Joules** de Potencia
- Apto Fototipo VI
- Libre de rayos Ultravioletas (UV free)
- Libre de rayos Infrarrojos (IR free)
- Sistema de Protección Ocular (OP)
- Altura regulable
- **LED's terapéuticos**
- Ancho de banda en espectro visible:



## APLICACIONES Y ESPECTROS

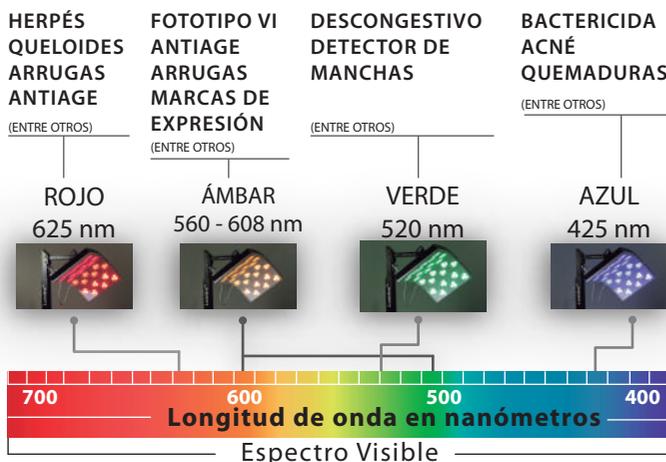

## Características terapéuticas

- La fotobiomodulación es una técnica de estimulación de las células dérmicas y epidérmicas.
- Para el logro de esta acción terapéutica, es necesaria la emisión de luz con led's terapéuticos de banda estrecha, con un mínimo de 196 joule de trabajo en el campo de aplicación.
- Se trata de una técnica probada a nivel mundial con mejoría en la textura de la piel, efecto anti-age, alto poder antiinflamatorio y descongectivo, mejoría en arrugas finas, acné, celulitis, entre otras y según el uso de cada color.
- Técnica indolora y potenciadora con el uso de activos o fármacos foto sensibilizadores.
- La fotobiomodulación es indicada para uso facial, corporal y capilar, de acuerdo a los efectos esperados y el impacto lumínico de cada color medido en nanómetros.

► **Desarrollo Exclusivo de NOTO.**

# N 1500 -C

TRANSFER TRANSDERMICO DE ALTO VOLTEJE ESPECÍFICO PARA CUERO CABELLUDO

## Innovación en tecnología de transferencia transdérmica

La incorporación de activos o fármacos por receta magistral utilizando la electroporación es una técnica en permanente evolución. Con el desarrollo del equipo N 1500 -C, NOTO® brinda la posibilidad de incorporar sustancias en el cuero cabelludo de forma específica acorde a la patología y sin molestias percibida por el paciente.

El tipo de onda propietaria del N 1500 -C permita cambiar el estado eléctrico celular de una forma precisa, segura y eficiente gracias al sistema de detector de impedancia (ID®) obteniendo los resultados esperados del profesional.

Gracias a la utilización de tecnología SMD, el equipo permite adaptarse a los umbrales de dolor de cada paciente, desde los más sensibles hasta aquellos con alta resistencia.

Los activos o fármacos a incorporar pueden ser preformulados o por receta magistral con una capacidad hasta 800.000 Da (Dalton).

- N 1500 -C
- **Capilar**, Facial y Corporal.
  - Único con tipo de **onda propietaria** para cuero cabelludo.
  - Cabezales de acero quirúrgico y resina acetal Hipoalérgica.
  - Control de tiempo y potencia
  - Sistema "ID" (impedance detector) incorporado



► **EXCLUSIVOS.** CON ONDAS EXPONENCIALES & ONDAS DECAMÉTRICAS.

## 3ª GENERACIÓN DE ELECTROPORADORES DE ALTA POTENCIA (AP).

DESARROLLADOS PARA INCORPORAR MOLÉCULAS MAYORES A 750.000 DALTON.

### Líderes en tecnología de Electroporación A.P.

Este sistema permite la administración transdérmica de principios activos liposomados o nanolipídicos. Los equipos de Noto aumentan la permeabilidad de la membrana celular alterando su estructura eléctrica, generando "canales" en forma reversible y transitoria. Permitiendo que los receptores incorporen principios activos según su necesidad.

Al ser equipos de Alta Potencia la Electroporación de Noto permite introducir tanto micro como macromoléculas, inclusive mayores a 750.000 Dalton como el ácido hialurónico, el D-mae, la heparina, etc. Por lo que, el abanico de tratamientos a realizar y productos a utilizar es mucho mayor que a otros equipos del mercado.

### Uso de corrientes exponenciales y decamétricas.

Al utilizar Ondas Decamétricas (facial) y Exponenciales (corporal) optimizan la penetración de los principios activos, logrando tratamientos más confortables.



**Sistema Exclusivo incluido en todos los equipos.**

El Sistema "ID" le indica al profesional que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado y que el equipo está midiendo la impedancia del paciente para emitir la corriente programada en forma correcta y segura.



N 1800

- Facial y Corporal.
- Cabezales 100% de Acero Quirúrgico.
- Sistema **ID (Detector de Impedancia)**.
- Bomba de Vacío para MDA.
- Control de Tiempo y Potencia.
- Puntas Diamantadas de Acero y Tungsteno de Alta Duración.
- Filtros Lavables y Reutilizables.
- Compatible con puntas descartables **New-Peel®**



\*1

N 1500

- Facial y corporal.
- Pantalla táctil.
- Control de Tiempo y Potencia
- Cabezales 100% de Acero Quirúrgico
- Sistema **ID (Detector de Impedancia)**
- Gabinete metálico.

\*\*Actualización para capilar, sólo en equipos modelo N 1500 fabricados a partir del año 2021

## ¡PERMITE 2 APLICACIONES AL MISMO TIEMPO!

8 CANALES. 16 ELECTRODOS. 2 PANTALLAS, ONDAS RUSAS, ONDAS CUADRADAS Y ONDAS T.E.N.S. INTERFERENCIALES

### N 1108 Progressive ¡Doble Comando!

El equipo N 1108 PROGRESSIVE demuestra el compromiso de Noto por el desarrollo de tecnologías innovadoras. Es la primera estación de trabajo de electroterapia y el más avanzado de la línea de equipos para electroestimulación estética y fisioterapéutica de Noto ya que posee la versatilidad de trabajar en forma conjunta sus 8 salidas o programar el equipo para 4

salidas con un tipo de programa y las otras 4 con otro programa, al mismo tiempo. Esta función, única en este tipo de equipos, permite al profesional trabajar diferentes zonas del cuerpo del paciente atendiendo la necesidad de la terapia a aplicar en cada zona corporal.

N 1108  
PROGRESSIVE

- Ondas Rusas, Ondas Cuadradas y T.E.N.S.
- 8 Canales Independientes.
- Arranque y finalización en Rampa.
- 2 Pantallas de programación Independiente.
- 51 Programas.
- Posibilidad de Variar parámetros de Tiempo de Tratamiento, Relajación y Contracción.
- 3 Relaciones.
- Variación de Frecuencia de 1 a 150 Hz.
- 5 Secuencias.
- T.E.N.S. Asimétrico y Simétrico.
- Interferencial Rusa Bipolar y Tetrapolar.
- Memorias.
- 100 mVA a 1 K de Impedancia.



► **EXCLUSIVO.** CON ONDAS EXPONENCIALES & ONDAS DECAMÉTRICAS.

## ONDAS RUSAS, ONDAS CUADRADAS Y ONDAS T.E.N.S.

CON REGULACIÓN DE TIEMPOS DE TRATAMIENTO, RELAJACIÓN, CONTRACCIÓN, SECUENCIA, FRECUENCIA Y RELACIÓN.

### Más opciones y prestaciones.

Ambos equipos son 100% digitales, bifásicos y cuentan con 4 canales con 4 salidas totalmente independientes, un transformador de aislamiento independiente por cada canal, arranque y finalización en rampa. Todo esto con el fin de lograr equipos más seguros y confiables.

Algunos programas: musculación, resistencia, fuerza, flaccidez, reductor, drenaje, celulitis, reafirmante, modelación, tonificación, aeróbico, dolor de espaldas, dolor agudo y descontractante.



N 1104  
PROGRESSIVE

- Ondas Rusas, Ondas Cuadradas y T.E.N.S.
- Memorias.
- Pantalla.
- 4 Canales Independientes.
- Arranque y Finalización en Rampa.
- 51 Programas.
- Posibilidad de Variar Todos los Parámetros.
- 3 Relaciones.
- Variación de Frecuencia de 1 a 150 Hz.
- 5 Secuencias.
- Gabinete Metálico
- T.E.N.S. Asimétrico y Simétrico.
- Interferencial Rusa Bipolar y Tetrapolar.
- 100 mVA a 1 K de Impedancia.

# N 1400 Aplicación biosegura facial y corporal

## ¡Control en cada maniobra!

El equipo N 1400 es **100%** digital posibilitando al profesional controlar la potencia de succión. La unidad permite adaptarse a cada fototipo y sensibilidad cutánea, desde los tejidos más gruesos hasta los más delicados.

## Bioseguridad

Además de poder trabajar detalladamente para la necesidad del profesional y patología en cuestión, el equipo N 1400 posee un filtro, manguera y lápiz esterilizable evitando la contaminación cruzada. Las puntas descartables **New-Peel** (desarrollo exclusivo de NOTO) adiciona un nivel de bioseguridad deshaciéndose totalmente de microorganismos residuales en los cabezales.



**20%  
+ ABRASION**

- 20 % Más de Abrasión.
- Control de Tiempo y Potencia.
- Puntas de Diamantes de Tungsteno.
- Cabezales de Acero Inoxidable.
- Transportable.
- Kit de Microdermoabrasión incluye:
  - 4 Cabezales Diámetro de 12 mm 50,100 150 y 200 Micraas.
  - 1 Cabezal de 22 mm de Diámetro y 150 Micras.
  - Filtros Lavables y Reutilizables.
  - Mango aplicador de Diseño Ergonómico. .
- Compatible con puntas descartables **New-Peel**®

# New-Peel®

Una Innovación pensada para el profesional

## Puntas para dermoabrasión **DESCARTABLES**

### ¡Desarrollo NOTO®!

Las puntas descartables New-Peel® en su versión facial y corporal, no requieren ser higienizadas o esterilizadas como las puntas tradicionales metálicas y se adaptan al 90% de los equipos de dermoabrasión, ya que son similares en su rosca, adaptación y fabricación.


### ¡Lápiz adaptador para **New-Peel**®!

De reciente lanzamiento, el lápiz desarrollado por NOTO® le permite al profesional utilizar las puntas descartables conectando la manguera de su equipo a éste con cualquier unidad de fabricación nacional como internacional.

## Beneficios New-Peel®

100%  
Descartables

- Maximiza la **bioseguridad** en el tratamiento.
- Producto Hipo Alergénico (no transmite bacterias, hongos o microorganismos).
- Mejora la sensibilidad al aplicarlo (no agrede/no lastima).
- Mayor rendimiento por pasada de abrasión.
- Libre de limpieza.
- Libre de uso de productos desinfectantes y bacterias pos tratamientos (descartables).
- Máxima higiene / máxima protección para el paciente.
- Clara identificación de micras a través de colores.
- **Adaptable** a cualquier equipo y lápiz.
- Optima ecuación costo beneficio.

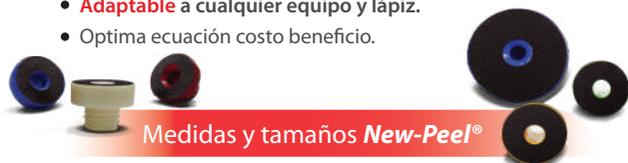

### Medidas y tamaños **New-Peel**®

Puntas de 12 mm  
Faciales

- - Fina - 50 micras
- - Normal - 100 micras
- - Gruesa - 150 micras
- - Extra - 225 micras

Puntas de 22 mm  
Corporales

- - Normal - 100 micras
- - Gruesa - 150 micras

## Lápiz adaptador para **New-Peel**



- Ergonómico
- Sencilla conexión a equipos de microdermoabrasión por punta de diamantes
- Lápiz inyectado
- Inclinación de rosca del cabezal a 45°

▶ ULTRASONIDO DE 3 MHZ

Compacto, seguro y efectivo.

¡Calidad y resultados!

Construidos con materiales de la más alta calidad como resina acetal hipoalergénica y el titanato de bario le brindan al profesional máxima seguridad y resultados.

Excelente equipo para trabajar patologías y efectos secundarios generados por otras técnicas gracias a su posibilidad de trabajo en forma **continua** o **pulsada** en 10, 50 y 80 Hz.



N1203

- LED de Emisión.
- Control de Tiempo y Potencia
- Modo Continuo y Pulsante Variable de 10, 50 y 80 Hz.
- 3 Watt x cm<sup>2</sup>
- Cabezales de Acero Quirúrgico y Resina Acetal Hipoalergénica.
- Mango aplicador, de Diseño Ergonómico.
- Transportable.

¡No dude en contactarse con nosotros, algo nuevo lo está esperando!

**Noto Group S.A.** Lascano 2852 (1417) C.A.B.A. - Argentina

Tel.: (+54 11) 4501-7129 / 0146

info@gruponoto.com / [www.gruponoto.com](http://www.gruponoto.com)

**NOTO**  
LA DIFERENCIA DE SER ÚNICO

 Noto Medicina Estética

 noto.ok